

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

POLARIS

ANALISI AVANZATA DEL FILM LACRIMALE

TEAR-FILM ADVANCED ANALYSIS



COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

POLARIS

analisi avanzata del film lacrimale

Il Polaris permette di valutare la stabilità e la regolarità del film lacrimale, mediante la misura del break up time non invasivo.


Con un cronometro, si misurano i secondi fra l'ultimo ammiccamento completo e la prima rottura dell'immagine riflessa sul film lacrimale.

caratteristiche

- Accessorio per lampada a fessura per l'analisi avanzata del film lacrimale.
- Può essere montato su lampade a fessura di qualsiasi marca.
- Funziona su lampade non digitali, con osservazione tramite microscopio Integrazione perfetta con lampade digitali, per funzionamento con separatore digitale (acquisizione di filmati).
- Alimentazione tramite porta USB, o da rete.
- Sorgente luminosa: LED bianchi.



Griglia per la misura del NIBUT

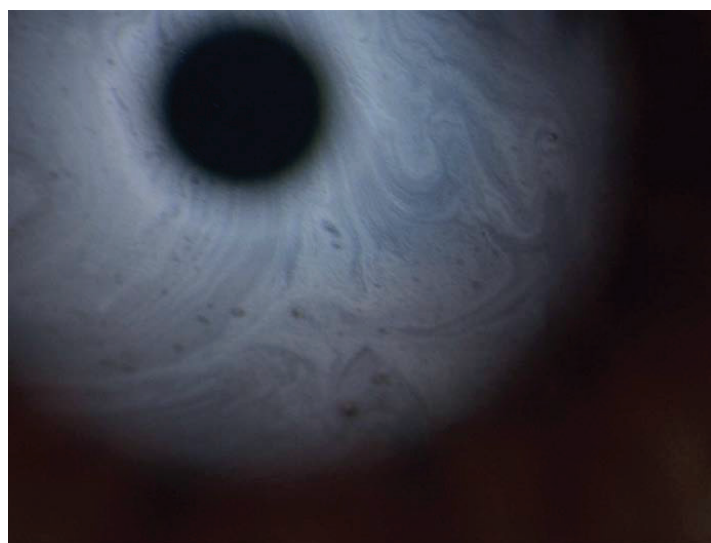

Costruzione Strumenti Oftalmici

Via degli Stagnacci 12/E, 50018 ScandicciFirenze, ITALY
Tel. ++39 055.722191, Fax. ++39 055.721557
www.csoitalia.it

REVISIONE 02 DEL 21/2/2011